



PANDUAN PENGUNAAN

*Menambah Data Aset Inventory
Medik (Add)*


**SISTEM ASET MANAGEMENT
RUMAH SAKIT (SAMRS)**




PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Menambah Data Aset Inventory Medik (Add)

- 1) Menambah data aset hanya bisa dilakukan SAMRS versi website, silahkan buka SAMRS versi website.
- 2) Klik menu “*Asset > Medical Equipment Unit > Inventory*” di sidebar (sisi kiri). Jika menu tersebut tidak muncul silahkan hubungi Administrator SAMRS untuk dibuka akses ke menu data aset (inventory).

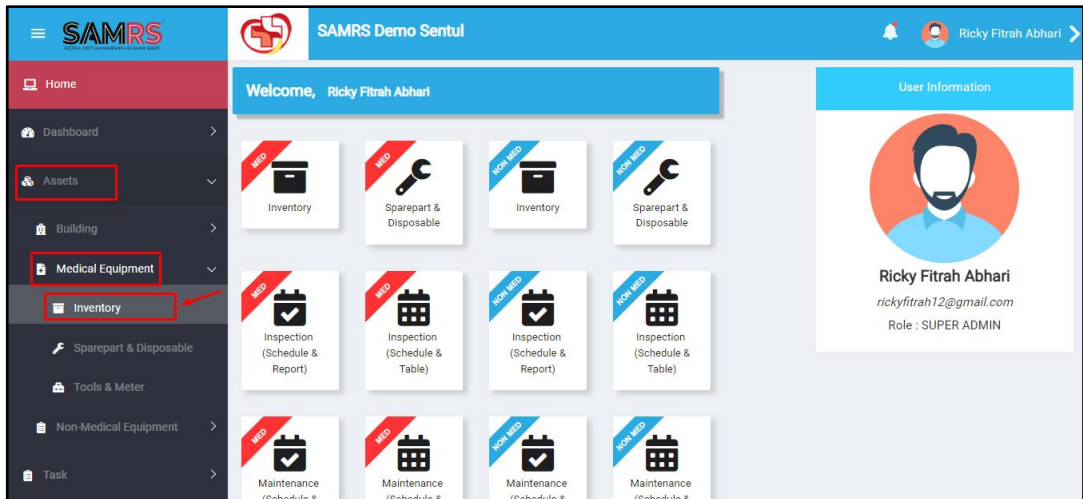

- 3) Akan muncul tabel daftar aset. Klik tombol “Add New”. Jika tombol tersebut tidak muncul silahkan hubungi Administrator SAMRS untuk dibuka akses untuk menambah data aset.

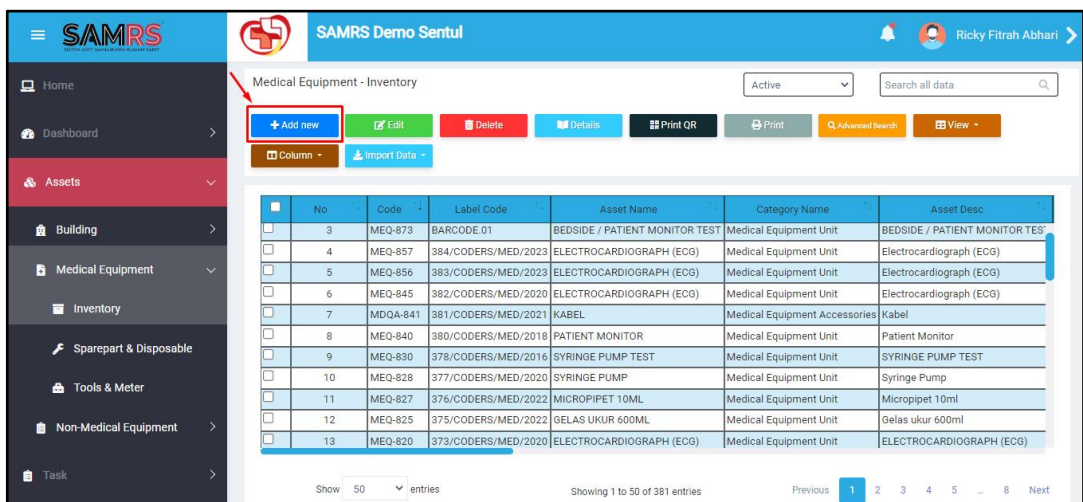

- 4) Silahkan isi “ASSET CATEGORY”. Jika anda ingin menambah kategori baru, silahkan tambah kategori di menu “*Master Data > Inventory Category*”.

Keterangan :

NO	PILIHAN ASSET CATEGORY	KETERANGAN
1	Medical Equipment Accesories	Kategori aset aksesoris/child dari sebuah unit.
2	Medical Equipment Unit	Kategori aset unit.
3	Instrument	Kategori aset instrument pieces.
4	Instrument Set	Kategori aset instrument set.

- 5) Akan muncul form input data aset. Silahkan anda isi form tersebut yang terbagi pada beberapa bagian. Dari bagian tersebut, yang wajib diisi yaitu bagian **UTAMA** (nama alat/aset master, brand/merk dan location/lokasi).

A. Bagian Utama

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	ASSET CATEGORY	Kategori aset. (wajib)
2	ASSET MASTER	Standar penamaan aset. (wajib)
3	ASSET NAME	Nama alias aset. Nama yang muncul pada tabel data inventory. (wajib)
4	ASSET DESC	Deskripsi aset. (optional)
5	BRAND	Pilihan merk aset. Jika tidak tersedia, klik simbol (+) untuk tambah baru merk. (opsional)
6	TYPE	Tipe aset. (opsional)
7	SERIAL NO	Nomor seri aset. (opsional)
8	LOCATION/ROOM	Lokasi aset. Jika tidak tersedia, silahkan input di menu master data room. (wajib)
9	ASPAK CODE	Kode yang mengacu dari ASPAK milik kemenkes. Otomatis akan muncul setelah pilih “ ASSET MASTER ”.
10	ASPAK NAME	Nama aset yang terdata di nomenklatur ASPAK milik kemenkes. Otomatis akan muncul setelah pilih “ ASET MASTER ”.
11	AKL/AKD NUMBER	Nomor surat izin edar aset. (opsional)

12	ROOM STANDAR ASPAK	Nama ruangan yang tercatat pada sistem ASPAK. (opsional)
13	HOSPITAL/SIMAK CODE	Kode yang mengacu dari SIMAK/SAKTI milik kemenkeu. Otomatis akan muncul setelah pilih "ASET MASTER.
14	HOSPITAL/SIMAK NAME	Nama aset yang terdata di nomenklatur SIMAK/SAKTI milik kemenkeu. Otomatis akan muncul setelah pilih "ASET MASTER.
15	NUP	Nomor urut pendaftaran yang diterbitkan dari SIMAK/SAKTI. (opsional)
16	CALIBRATION REQ	Jika alat tersebut perlu dilakukan kalibrasi rutin maka pilih "YES" namun jika tidak pilih "NO".
17	RISK LEVEL	Level resiko aset. (opsional)

B. Bagian Tab "General"

The screenshot shows the 'Add New Inventory Medical Equipment' form. The 'GENERAL' tab is selected. Fields include: TYPE (DASH 2000), SERIAL NO (SK21809008YWA), LOCATION / ROOM (Graha Andalan | Lantai 2 | Perinatologi), HOSPITAL/SIMAK CODE (3.07.01.13.005), HOSPITAL/SIMAK NAME (Patient Monitor), NUP (5), CALIBRATION REQ (On), RISK LEVEL (Medium), PROCUREMENT DATE (2020-06-08), RECEIVED DATE (2020-06-08), PRICE BUY (Rp. 20000000), SUPPLIER / VENDOR (Prima Alkesindo Nusantara, PT), CONDITION (Balk), OWNERSHIP (Owned), SOURCE OF FUNDS (APBN), STATUS ACTIVATION (Active), INACTIVE DATE, WARRANTY EXPIRED (2021-06-08), INSURANCE EXPIRED, ELECTRICAL OUTPUT, and OTHER INFORMATION (Test Desc). Red arrows point to the 'GENERAL' tab and the 'PROCUREMENT DATE' and 'WARRANTY EXPIRED' fields.

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	PROCUREMENT DATE	Tanggal pengadaan/pembangunan aset. (opsional)
2	RECEIVED DATE	Tanggal masuk. (opsional)
3	PRICE BUY	Harga nilai aset. (opsional)
4	SUPPLIER/VENDOR	Supplier pengadaan aset. (opsional)
5	CONDITION	Kondisi aset. (opsional)
6	OWNERSHIP	Kepemilikan aset. (opsional)
7	SOURCE OF FUNDS	Sumber dana aset. (opsional)
8	STATUS ACTIVATION	Status aset aktif atau tidak aktif. (opsional)
9	INACTIVE DATE	Tanggal non aktif aset. (opsional)
10	WARRANTY EXPIRED	Batas masa garansi. (opsional)
11	INSURANCE EXPIRED	Batas masa support dari pihak III. (opsional)
12	ELECTRICAL OUTPUT	Daya listrik aset. (opsional)
13	OTHER INFORMATION	Catatan informasi lainnya. (opsional)

C. Bagian Tab “Code”

The screenshot shows the 'Add New Inventory Medical Equipment' form with the 'CODE' tab selected. The form is divided into several sections: 'Medical Equipment Unit', 'Aspak', 'Simak', and 'Code'. The 'Code' section contains the following fields:

- EQ. CODE: (highlighted with a red box)
- BARCODE: 353/CODERS/MED/2020 (highlighted with a red box)
- TERACODE: (empty)
- OTHER CODE 1: AMD-1 (highlighted with a red box)
- OTHER CODE 2: OTH-2 (highlighted with a red box)

At the bottom right of the form, there are 'Save & Exit' and 'Cancel' buttons.

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	EQ. CODE	Kode aset yang dibuat otomatis oleh sistem SAMRS. Silahkan dikosongkan.
2	BARCODE	Kode aset internal rumah sakit bila perlu dimasukkan untuk dimunculkan di label QR Code. (opsional)
3	TERACODE	Kode aset akunting. (opsional)
4	OTHER CODE 1	Kode lain. (opsional)
5	OTHER CODE 1	Kode lain. (opsional)

D. Bagian Tab “File”

Tab file berfungsi untuk memasukkan file terkait aset seperti foto, dokumen kontrak, SOP, dll.

Add New Inventory Medical Equipment

BRAND * GE +

TYPE DASH 2000

SERIAL NO SK21809008YWA

LOCATION / ROOM * Graha Andalan | Lantai 2 | Perinatologi Pick

Simak

HOSPITAL/SIMAK CODE 3.07.01.13.005 HOSPITAL/SIMAK NAME Patient Monitor NUP 5

CALIBRATION REQ On RISK LEVEL Medium

GENERAL CODE **FILE** DEPRECIATION 1

Upload new file

#	File Name	File Category	Action
1	537_Patient_Monitor_2.jpeg	EQUIPMENT PHOTO	
2	536_Patient_Monitor_1.jpeg	EQUIPMENT PHOTO	
3	531_SOP Penggunaan Dash 2000.pdf	STD. OPERATING PROCEDURE (SOP)	
4	530_SOP Pemeliharaan Patient Monitor.pdf	STD. OPERATING PROCEDURE (SOP)	
5	529_GE Dash 2000 - User manual.pdf	USER MANUAL	

Previous 1 Next

Save & Exit Cancel

E. Bagian Tab “Depreciation”

The screenshot shows the 'Add New Inventory Medical Equipment' form with the 'DEPRECIATION 1' tab selected. The 'DEPRECIATION 1' tab is highlighted with a red box and an arrow. The 'PROCUREMENT DATE' field is also highlighted with a red box and an arrow. The 'YEAR DEPRECIATION' field is highlighted with a red box and an arrow. The form includes fields for ASSET NAME, ASSET DESC (OPTIONAL), BRAND*, TYPE, SERIAL NO, LOCATION / ROOM*, HOSPITAL/SIMAK CODE, HOSPITAL/SIMAK NAME, NUP, CALIBRATION REQ, RISK LEVEL, RESIDUAL VALUE, YEAR DEPRECIATION, ACCUMULATED DEPRECIATION, and BOOK VALUE. The 'Save & Exit' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom right.

Keterangan :

NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	PROCUREMENT DATE	Tanggal pengadaan/pembangunan aset. (opsional)
2	YEAR OPERATION	Tahun operasi aset. (opsional)
3	PO. NUMBER	Nomor Purchase Order pembelian aset. (opsional)
4	PRICE	Harga nilai aset gedung. (opsional)
5	EXP. LIFE TIME	Harapan usia aset gedung dalam satuan tahun. (opsional)
6	CALCULATION DATE	Tanggal mulai perhitungan depresiasi aset. “ Calculation Date ” diisi jika perhitungan depresiasi aset bukan dari tanggal pengadaan (Procurement Date). (opsional)
7	RESIDUE VALUE	Nilai residu aset. (opsional)
8	YEAR DEPRECIATION	Nilai penyusutan pertahun akan muncul berdasarkan perhitungan : ✓ Procurement Date/Calculation Date

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Price ✓ Expectation Life Time
9	ACCUMULATED DEPRECIATION	<p>Nilai akumulasi aset akan muncul berdasarkan perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procurement Date/Calculation Date ✓ Price ✓ Expectation Life Time
10	BOOK VALUE	<p>Nilai aset akan muncul berdasarkan perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Procurement Date/Calculation Date ✓ Price ✓ Expectation Life Time

- 6) Setelah form pengisian diisi, klik tombol “**Save & Exit**” untuk menyimpan data.
- 7) Data aset yang baru ditambah akan muncul pada master data tabel daftar aset rumah sakit.

