



SISTEM ASET MANAJEMEN RUMAH SAKIT

PANDUAN PENGUNAAN

*Membuat Jadwal Pemeliharaan
(Maintenance)*


**SISTEM ASET MANAGEMENT
RUMAH SAKIT (SAMRS)**




PT. FALITECHNO MANDIRI INDONESIA

Membuat Jadwal Pemeliharaan (Maintenance)


- 1) Untuk membuat jadwal kegiatan maintenance hanya bisa dilakukan menggunakan SAMRS versi Website.
- 2) Buka aplikasi SAMRS versi Website.

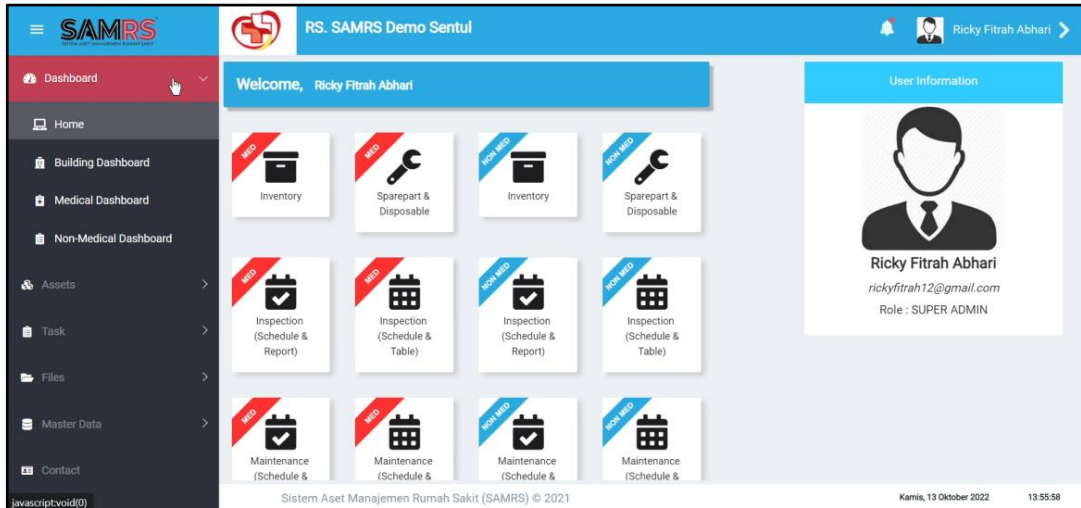

- 3) Masuk ke menu **“Task > Electromedic Task > Maintenance > Schedule & Report”**.

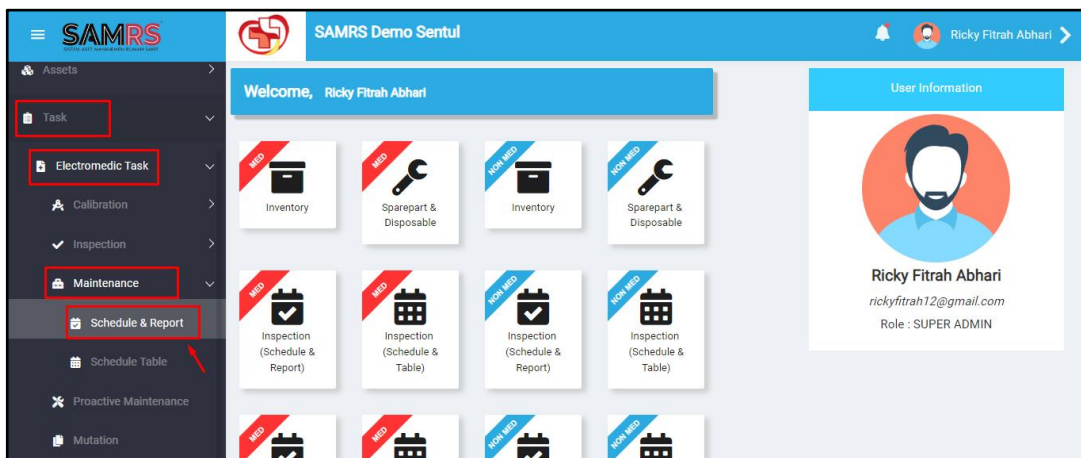

- 4) Klik tombol **“Add New”**.

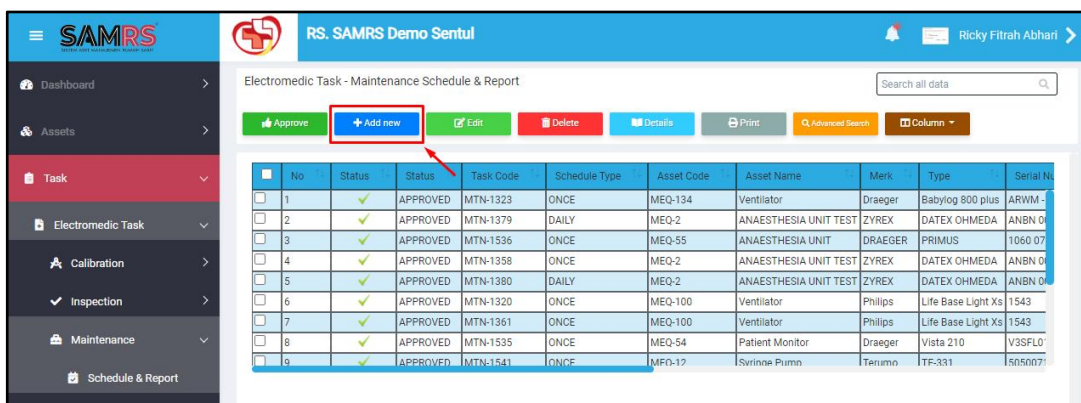


5) Isi dan lengkapi form jadwal maintenance.

Keterangan :


NO	FORM PENGISIAN	KETERANGAN
1	Interval <i>(wajib diisi)</i>	Jarak antara jadwal awal maintenance dan selanjutnya. Sistem akan membuat jadwal sesuai interval berdasarkan <i>Date Maintenance Start</i> dan <i>Date Maintenance End</i> .
2	Date Maintenance Start <i>(wajib diisi)</i>	Batas awal jadwal maintenance.
3	Date Maintenance End <i>(wajib diisi)</i>	Batas akhir jadwal maintenance. *Note : Jika pengisian interval “Once” tidak perlu mengisi “Date Maintenance End”
4	Assign To <i>(opsional)</i>	Penugasan kepada teknisi tertentu (1 orang) dan hanya akun teknisi yang dipilih di “ <i>Assign To</i> ” yang boleh input/update form maintenance. Teknisi yang tidak dipilih “ <i>Assign To</i> ” tidak bisa input/update form. *Note : Jika teknisi sudah dipilih, namun berhalangan input laporan maintenance, ada fitur update “ <i>Assign To</i> ” untuk merubah nama

		teknisi tersebut.
5	Team List <i>(opsional)</i>	Penugasan kepada teknisi tertentu (1 orang atau lebih) dan tidak menjadi keharusan teknisi yang dipilih di “Team List” yang melakukan input/update form maintenance. Teknisi yang tidak termasuk di “Team List” tetap bisa mengerjakan input/update form.
6	Vendor <i>(opsional)</i>	Nama institusi pihak ke 3 (jika dilakukan oleh vendor).
7	Add Schedule <i>(wajib dipilih)</i>	Pemilihan alat yang ingin direncanakan kegiatan maintenance.
8	Form	Kolom Form wajib terisi. Jika kosong, menandakan anda belum membuat form template terkait aset tersebut dan silahkan buat template form terlebih dahulu di menu “Files > Form > Maintenance” .

- 6) Klik tombol “Save & Exit”.
- 7) Jika pada bagian kolom **“Form”** pengisiannya **“GMF”** (General Maintenance Form), artinya aset tersebut belum memiliki form khusus. Sehingga form yang digunakan adalah form template general dari SAMRS.

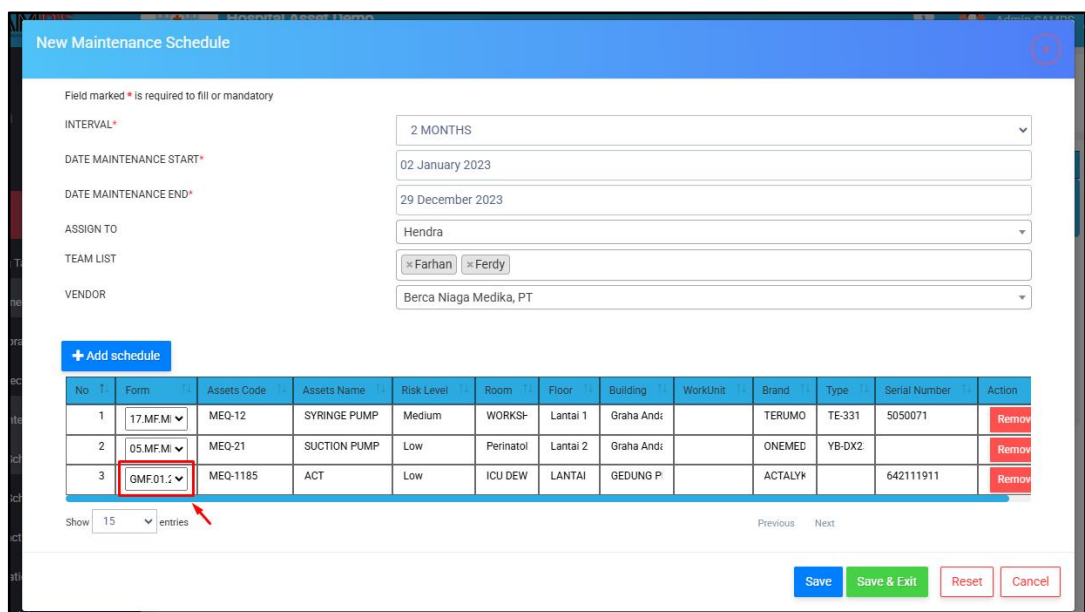

Jika seperti itu, Anda perlu membuat template form maintenance di menu **“Files > Form > Maintenance”**. Petunjuk pengisian bisa anda lihat di manual book SAMRS **“8.1 Membuat template form maintenance via website”**.

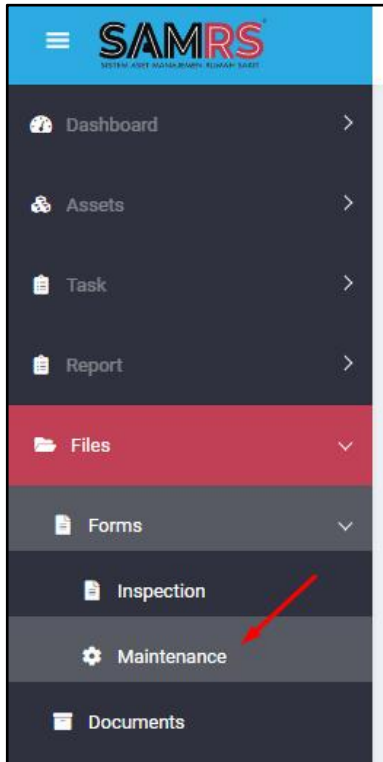

8) Jika data pengisian lengkap, form jadwal maintenance alat akan tersimpan dengan status (✘) yang artinya belum dikerjakan dan bisa dilihat di menu daftar maintenance di **“Task > Electromedic Task > Maintenance > Schedule & Report”**.

The screenshot shows the SAMRS web application interface. The page title is 'Electromedic Task - Maintenance Schedule & Report'. The table below shows the data for maintenance tasks.

No	Status	Status	Task Code	Schedule Type	Asset Code	Asset Name	Merk	Type	Serial Number
1	✘	NEW	MTN-1584	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
2	✘	NEW	MTN-1585	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
3	✘	NEW	MTN-1586	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
4	✘	NEW	MTN-1587	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
5	✘	NEW	MTN-1588	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
6	✘	NEW	MTN-1589	2 MONTHS	MEQ-12	Syringe Pump	Terumo	TE-331	5050071
7	✘	NEW	MTN-1594	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-
8	✘	NEW	MTN-1593	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-
9	✘	NEW	MTN-1592	2 MONTHS	MEQ-21	Suction Pump	B Braun	YB-DX23B	-